

MCPDriver | 2. Generation



IDEALE KANDIDATENSPEZIFIKATIONEN:

- Ideale Kandidaten für den MCPDriver. haben ausreichende Fingerlänge um den Ring der Prothese zu bedienen.

Der MCPDriver. hat eine Vorlaufzeit von vier bis sechs Wochen ab dem Zeitpunkt, zu dem alle erforderlichen Dokumente, Fotos und Informationen eingegangen sind.



Eine robuste und funktionale Lösung: MCPDriver.™

Entworfen für Amputationen Innerhalb dem ersten Fingerglied, stellt der MCPDriver. die mittleren und distalen Phalangen wieder her. Diese abhängig artikulierenden Pads helfen dabei, natürliche Griffmuster zu erzeugen. (Der MCPDriver. zeichnet sich durch die Wiederherstellung von Klemm-, Schlüssel- und Zylindergriffen sowie die Griffstabilität aus.) Der robuste Metallrahmen und die austauschbaren Komponenten ermöglichen es dem Benutzer, besonders anspruchsvollen Lebensstilen mit Zuversicht zu begegnen.

Der MCPDriver der zweiten Generation zeichnet sich durch verbesserte Ästhetik und Komfort, präzisionsgefertigte Komponenten und stilvolle Farboptionen aus.


Die Anpassung des MCPDrivers ist nicht der einzige Komfortaspekt auf dem Gerät.

WEITERE KOMFORTASPEKTE:

- Silikon auf der Rückseite der Hand Rückenplatte, um Komfort und Polsterung hinzuzufügen.
- Austauschbare Ringe für Volumenschwankungen.
- Passscheiben, die hinzugefügt oder entfernt werden können, um die Ringgröße zu optimieren und mehr Komfort und Federung für den Finger zu bieten.
- Abdämpfungsscheiben (Fingerdrehpunkte), die verstellbar sind und vom Prothetiker, Therapeut oder vom Träger bewegt werden können, um das bestmögliche Griffmuster zu erhalten.
- Natürliche Abduktion und Adduktion erlauben dem Träger, das Gerät intuitiv zu benutzen. Dies verringert die Akklimatisierungszeit, wenn das Gerät eingeführt wird erheblich und erlaubt es, viele Arten von Ergreifungen, wie beispielsweise den kugelförmigen Griff, durchzuführen, was ohne Abduktion nicht möglich wäre.

Diese Komfortaspekte sind es, die den MCPDriver. im Vergleich zu seinen Mitbewerbern auszeichnen.

DESIGN AUSWAHL:

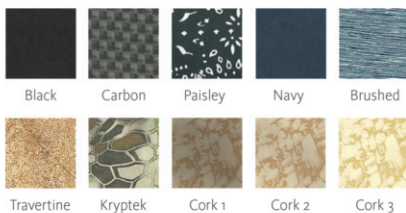

Für mehr Informationen: (888) 977-6693 | (360) 915-9724 | fax (360) 918-8619 info@npdevices.com or visit npdevices.com
© 2018 Naked Prosthetics. Alle Rechte vorbehalten.



Vertrieb:



PROTHESEUS
Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Protheseus GmbH
Liebigstraße 13
91126 Schwabach
☎+49(0)9122 88707-0

NAKED
PROSTHETICS



PIPDriver. | 2. Generation



ZUSÄTZLICHE KOMFORT ASPEKTE:

- Individuell angepasst an die täglichen Bedürfnisse Ihres Patienten.
- Leicht zu reinigen, pflegen, an- und ausziehen.
- Hergestellt aus robustem und langlebigem medizinischem Nylon 12.
- Solide Struktur schützt den Residuum.
- Schlankes und elegantes Design ermöglicht das Tragen mehrerer Geräte.
- Passende Silikonpolster ähneln der natürlichen Fingerspitze.
- Leichte Titanbefestigungen.

Der **PIPDriver** hat eine vier- bis sechswöchige Vorlaufzeit ab dem Zeitpunkt, zu dem alle erforderlichen Unterlagen eingegangen sind.



Der PIPDriver steht fuer optimale Funktionalitaet.

Entworfen fuer Personen mit amputierungen distal zu dem Mittelgelenk. Von den Produkten, die wir anbieten, ist der **PIPDriver**. Intuitiv und am einfachsten zu bedienen.

Da das Gerät direkt dem Finger des Patienten ansitzt, können wir seine PIP- und DIP-Gelenke anatomisch anpassen, so dass konsistent und natürlich funktioniert. Der **PIPDriver** bietet einen Zuverlässigen täglichen Nutzen. Der **PIPDriver**, der zweiten Generation kombiniert die gleiche zuverlässige Funktionalität mit einem neuen, eleganten ästhetischen Design, verbesserten Scharnieren und einer Vielzahl von Farboptionen.


IDEALE KANDIDATSPEZIFIKATIONEN:

- Ideale Kandidaten brauchen ausreichende Fingerlänge um den Ring der Fingerprothese zu bedienen. Dieses ermöglicht Bewegung des DIP Endfingerelenk.

Für einen Amputierten, der die Mindestanforderungen für den **PIPDriver** nicht erfüllt, ist es möglich, einen funktionalen Nutzen aus dem PIPDriver zu erwerben. Vor der Bestellung eines Geräts müssen jedoch besondere Überlegungen angestellt werden

Sizing ist einfach. Es verlangt das Bestellen eines Naked Prosthetics Kit, das Ausfüllen der Formulare, das Einreichen detaillierter Bilder beider Hände und ein Video mit ROM. Aus diesen Informationen entwickeln und fertigen unsere Ingenieure eine maßgeschneiderte funktionelle Fingerprothese.

DESIGN AUSWAHL:

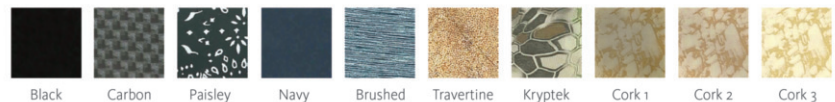

Organisch

Minimalistisch



Für mehr Informationen: (888) 977-6693 | (360) 915-9724 | fax (360) 918-8619 info@npdevices.com or visit npdevices.com
© 2018 Naked Prosthetics. Alle Rechte vorbehalten.



Vertrieb:



PROTHESEUS
Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Protheseus GmbH
Liebigstraße 13
91126 Schwabach
☎ +49(0)9122 88707-0



ThumbDriver.



IDEAL KANDIDAT SPEZIFIKATIONEN:

- Dieses Gerät wird durch intakte MCP- und CMC-Gelenke im Daumen angetrieben. Patienten mit mehr proximalen Amputationen können jedoch immer noch von der Vorrichtung mit genügend Residuum profitieren, um den Ring in Eingriff zu bringen.

Der **ThumbDriver** hat eine Vorlaufzeit von sechs bis acht Wochen ab dem Zeitpunkt, zu dem alle erforderlichen Dokumentationen, Fotos und Informationen eingegangen sind.



Eine robuste und funktionale Lösung: **ThumbDriver**:

Das neueste Produkt in unserer Aufstellung teilt sein Erbe mit dem **MCPDriver**: Es verfügt über ein einzigartiges Ankerdesign, das die natürliche CMC-Bewegung des Patienten nachzeichnet und dennoch eine starre Struktur bietet, um auf die starken Kräfte zu reagieren, die durch die Daumenopposition erzeugt werden. Die Spitze ist positionierbar und artikuliert subtiler als im **MCPDriver**; was die gängigsten Daumengriffe ermöglicht.

Als Holzarbeiter verlässt sich Joe auf seine nicht dominante Hand, um Werkzeuge und Materialien zu halten. Innerhalb von 5 Wochen nach Erhalt seiner Prothese erhöhte sich Joes Griffkraft um 50%. Joe trägt das Gerät jeden Tag für fast jede Aktivität, ohne Unbehagen oder Müdigkeit. Fünf Wochen nach der Intervention zeigte Joe eine dramatische Verbesserung seiner QuickDash-Ergebnisse. Er ist jetzt wieder als Schreiner tätig und trägt sein Gerät bis zu 16 Stunden am Tag.

Quick-DASH	Arbeits	Modul
Durchschn.	11	10
Vorgerät	55	69
5 Wochen nach	20	31

DESIGN AUSWAHL:



Für mehr Informationen: (888) 977-6693 | (360) 915-9724 | fax (360) 918-8619 | info@npdevices.com or visit npdevices.com
© 2018 Naked Prosthetics. Alle Rechte vorbehalten.

Vertrieb:



PROTHESEUS
Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Protheseus GmbH
Liebigstraße 13
91126 Schwabach
☎ +49(0)9122 88707-0



